

DRIONIC APPAREIL ANTI-TRANSPIRATION MAINS-PIEDS



1. CONTENU APPAREIL

- 4 petits feutres
- Appareil et batteries
- 2 batteries supplémentaires



2. MODE D'EMPLOI

Préparation

- Retirez les petits feutres de l'appareil et trempez-les sous l'eau du robinet (pas sous l'eau distillée) pendant environ 5 minutes.
- Ne pas tordre les petits feutres et les replacer dans l'appareil par-dessus les petites plaques en métal.
- Remplissez la partie profonde d'eau du robinet. Lorsque votre main ou pied se trouve dans l'appareil, le niveau d'eau doit arriver à plus au moins 5 mm du bord. Sur la partie surélevée, il doit y avoir un mince film d'eau sur les petits feutres (si ce n'est pas le cas, ajouter encore un peu d'eau).
- Important : il ne peut pas y avoir de l'eau dans l'appareil même où se trouve l'électronique. Si c'est tout de même le cas, éteignez-le immédiatement et séchez-le.

Méthode

- Allumez l'appareil (la lampe de contrôle s'allume en vert) sur la position la plus basse possible.
- Placez votre main ou pied comme sur le dessin ci-dessous.

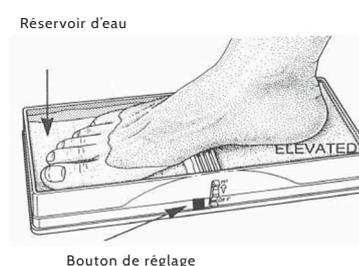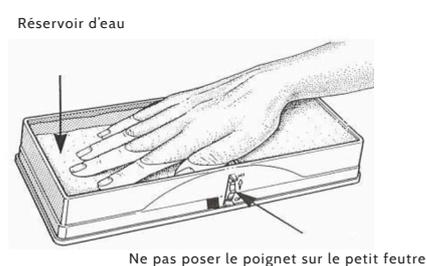

Bouton de réglage

Position de la main : Bouton de réglage - Placer le pouce aussi près que possible du bouton de réglage.

- Il est important que les doigts/orteils soient dans la partie la plus basse. Le reste de la main/du pied repose sur la partie la plus haute (sur le petit feutre) et est aussi traité. Attention, c'est pourquoi ces petits feutres doivent aussi être mouillés, pour garantir le passage des impulsions électriques.
- Tourner le bouton de réglage lentement vers le haut (tourner de LO vers HI) jusqu'au niveau que vous pouvez le supporter. Lorsqu'on sent des picotements, c'est bon. Maintenir cette position pendant 30 minutes. En cas de douleur, tourner le bouton de réglage vers le bas.
- Après le traitement, tourner le bouton de réglage vers le bas (de HI vers LO) jusqu'à ce que la lampe de contrôle s'éteigne.
- Retirer l'eau du réservoir après chaque utilisation.
- Retirer les petits feutres, les rincer et les laisser sécher des deux côtés.

Traitement des mains

Les mains sont plus sensibles aux impulsions électriques que les pieds. On peut mettre un petit peu de vaseline sur les endroits très sensibles. Posez toujours les mains à plat dans l'appareil, jamais de façon à ce que seuls les bouts des doigts touchent l'appareil.

Traitement des pieds

Ne vous mettez jamais debout sur l'appareil mais asseyez-vous pour le traitement.

Remarques

- Au cours de chaque traitement, toujours recouvrir complètement les petites plaques en métal par les petits feutres. Ne jamais entrer directement en contact avec les petites plaques pendant le traitement.
- S'il y a des crevasses ou des blessures, appliquer un peu de vaseline à ces endroits.
- Eteindre l'appareil après chaque traitement.
- Le but de chaque traitement consiste en supporter des impulsions électriques d'un niveau aussi élevé que possible.
- Après entre les 6 à 20 jours, la transpiration diminue.
- Répéter le traitement chaque jour pendant une trentaine de minutes.
- Réduire la thérapie lorsque la transpiration diminue, par exemple en répétant le traitement tous les deux jours et en le réduisant au fur et à mesure jusqu'à une fois par semaine. Ceci donne de meilleurs résultats à long terme.
- Vous pouvez directement redémarrer la thérapie si la transpiration augmente tout à coup. Recommencez alors le traitement après quelques semaines, dès que vous remarquez que la transpiration excessive recommence.

Contre-Indications

- **Les patients présentant des problèmes cardiaques, une grossesse, de l'épilepsie, une phlébotrombose, une thrombophlébite ou porteurs d'un pacemaker, d'un défibrillateur cardiaque ou d'implants métalliques, n'entrent pas en ligne de compte pour ce traitement. Cet appareil est aussi déconseillé aux enfants de moins de 9 ans.**
- En cas de transpiration irrégulière des mains / des pieds, consulter un médecin.
- Très rarement, une décoloration grise peut se produire sur la peau en raison, par exemple, d'une exposition à un niveau trop élevé d'impulsions électriques. Si cela se produit, arrêter le traitement et donner à la peau le temps de se réparer. Ensuite, commencer le traitement à un niveau plus bas.

Entretien appareil

- Remplacer les batteries après 14 utilisations (utiliser les batteries originelles). La lampe de contrôle devient rouge.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les batteries de l'appareil.
- Remplacer au moins chaque année les petits feutres.